

FICHE AUDIT ZOLL « AED PLUS »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



ZOLL AED PLUS DSA

ZOLL AED PLUS DEA

Pour valider le choix ci-dessus : Sur la face avant du DAE, après le retrait du capot, vous serez face à un écran avec des pictogrammes. Vous avez soit l'icône du cœur avec la main, soit le cœur seul



= DSA (cochez DSA)



= DEA (cochez DEA)


L'indicateur du défibrillateur « coche verte » est présent : Oui / Non

Date de la mise en service :/...../.....

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) :

Numéro de série du défibrillateur :

(A l'arrière du défibrillateur. Ex : S/N **X14B653988**)

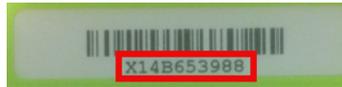

Informations sur les électrodes thérapeutiques « adulte » (Informations visibles sur la face avant du sachet des électrodes)

Référence (à côté du logo « REF ») : 8900-0800-01 8900-0402 8900-0801-01 Autre, précisez :

Lot (à côté du logo « LOT ») :

Date de péremption (à côté du logo SABLIER) :/...../.....

Informations sur les électrodes thérapeutiques « pédiatrique » (Informations visibles sur la face avant du sachet des électrodes)

Référence (à côté du logo « REF ») : 8900-0810-01 Autre référence, précisez :

Lot (à côté du logo « LOT ») :

Date de péremption (à côté du logo SABLIER) :/...../.....

Date du dernier changement des piles lithium :/...../.....

Cochez la marque de vos piles : Duracell Lithium PowerOne Autre marque

INFORMATION : Aide au retrait du capot des piles en page 2

Sans case de cochée, vos piles seront systématiquement changées (précaution de sécurité).



Si Duracell / Date de fabrication des piles :/.....

(Inscription noire sur un fond noir. Ex : **2016/07**)

Si Duracell / Date limite d'utilisation :/.....

(Inscription blanche sur un fond noir. Ex : **MAR 2021**)



Numéro de la version :

(Pour obtenir la version, il faut rester appuyé sur le bouton marche/arrêt en continu. Dès que l'écran s'allume, relâcher l'appui. La version de MAJ commençant par « P » va s'afficher. Ex : P :05.32)

Le défibrillateur est stocké en permanence entre 5°C et 45°C : Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cochez l'installation : Extérieur Intérieur

Présence d'un PC Sécurité : Oui / Non **Présence d'un accueil** : Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :

Aide au retrait du capot des piles

Vérifier que l'appareil est hors tension. Ouvrir le compartiment des piles en retirant le couvercle de ce compartiment, situé à l'arrière de l'appareil.

Pour cela, insérer un petit outil (par exemple, un tournevis plat) dans les deux fentes situées à l'arrière de l'appareil pour appuyer sur les loquets, puis introduire l'outil dans la rainure pour soulever le couvercle (voir Figure 7).



Figure 7 : Retrait de la porte du compartiment des piles

